


Swobodny spadek w cieczech

Niezobowiązująca informacja z www.conatex.pl z dn. 01.05.2025/DE1

Nr art.: 1132013

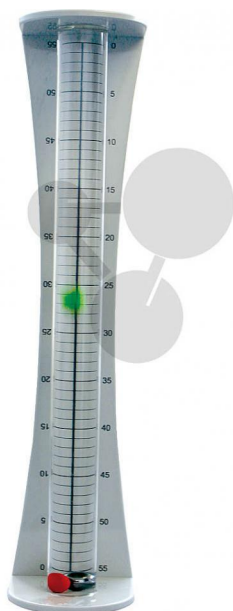

to strony z
produktem

888,55 zł brutto

Zasada działania: Kulka o masie M znajduje się w jednorodnym otoczeniu. Jeśli pozwoli się kulce spadać pionowo, to ruch opadania jest niejednostajnie przyspieszony. Zestaw składa się z trzech kulek o różnej gęstości, które można upuszczać pojedynczo razem ze znajdującym się w zestawie magnesem.

Można przeprowadzić następujące doświadczenia:

- prezentacja przyspieszenia spadku przy pomocy stroboskopu.
- obliczenie lepkości w zależności od temperatury

Wymiary:

Wysokość: 550 mm, średnica rury: 50 mm

Zawartość:

Rura Newtona ze skalą, 3 kulki ferromagnetyczne o różnej gęstości i barwie, 1 magnes. Ciecz nie jest dołączona do zestawu.

Akcesoria niezbędne

Olej wazelinowy, 1 l

Nr art. 1132015

105,25 zł brutto

